

# АМнп-01

## АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ

Профессиональное лечение  
по современным медицинским  
стандартам



Большая площадь  
воздействия



4 режима работы



Удобен  
в использовании



Доступная цена



Два уровня  
магнитного поля



## АМнп-01

АМнп-01 будет полезен для:

- пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, в том числе в случае обострения
- дачников, имеющих серьезные нагрузки на опорно-двигательный аппарат
- спортсменов, у которых существует высокая вероятность получения травм и растяжения связок
- женщин, которые заботятся о себе и здоровье своих близких – помощь в лечении хронических заболеваний старшего поколения, ушибов и травм детей.



Эффективен при лечении:

Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, радикулит, остеоартроз, полиартриты



Травмы-переломы, ушибы, растяжения связок



Заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как гипертония, вегетососудистая дистония

Варикозное расширение вен



Заболевания бронхо-легочной системы (хронический бронхит), ускоряет процесс восстановления после пневмонии

Заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как язвенная болезнь, хронический панкреатит и холецистит

Заболевания кожи: дерматоз, экзема, псориаз, угревая сыпь.

**ВНИМАНИЕ! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ**

Физиотерапевтический аппарат АМнп-01 предназначен для воздействия в лечебных целях пульсирующим или переменным низкочастотным магнитным полем.



Разработан специально для домашнего применения

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Магнитная индукция  
10-30 мТл

Переменное и пульсирующее магнитное поле

Ремни для фиксации



**Аппарат АМнп-01 обеспечивает улучшение микроциркуляцию крови и лимфы, это приводит к:**

- улучшению кровообращения
- восстановлению поврежденных тканей
- обезболивающему эффекту
- снижению воспалительных процессов
- уменьшению отеков
- активизации обмена веществ.

✓ **Большая площадь воздействия** прибора увеличивает эффективность лечения;

✓ **Значительно усиливает воздействие** лечебных мазей и кремов, наносимых после проведения процедур.

Доступная цена прибора по сравнению с аналогами

✓ **Удобство в использовании.** В комплекте к прибору прилагаются ремни 0,5 и 1,5 метра, с помощью которых можно закрепить прибор на теле.

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

1. Установите аппарат на тело (рука, нога, спина и т.д.)
2. Аппарат прикладывается к телу стороной без кнопок и регуляторов.
3. Зафиксируйте аппарат к телу ремнями
4. Подключите шнур питания.
5. Зафиксируйте время начала процедуры. По окончании времени воздействия, отключите питание.



Показание	Режим поля	№ точки	Количество процедур	Продолжительность воздействия
Гипертоническая болезнь I-II степени	~	1	10	15+15
Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен.	~	2,3	До 20	20
Незаживающая язва голени	~	4,5	10-15	20
Боли в шее, плечах (цервикалгия, брахиалгия)	~	6,7	До 15-20	15
При снижении памяти, головных болях, головокружении (церебральный атеросклероз)	~	6	15	10-15
При болях в суставах без отека, при ушибах мягких тканей, суставов, костей, растяжении связок воздействовать с каждой стороны (внутренней и внешней) сустава, а также на места максимальной болезненности	~/-	4,8,9, 10,11,19	До 15	10-15
При закрытых переломах костей, после наложения иммобилизирующей повязки и полной остановки кровотечения	~/-	4,8,9, 10,11,19	7-10	10-15
Бронхит, хроническая пневмония, бронхиальная астма	~	12,13	До 10	10-15
Болезнь Рейно	~	6,9,14,16	До 20	15-20
Язвенная болезнь 12-перстной кишки, гастродуоденит	~	13,17	До 10	10-15
Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей	~/-	5,16	До 20	15+15
Остеохондроз с корешковыми болями	~/-	18	15-20	15+15
Язвенная болезнь желудка	~/-	17	До 15	20



\*Воздействие производится на пораженный участок

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.**




Расположение точек на теле

Расположение точек на теле

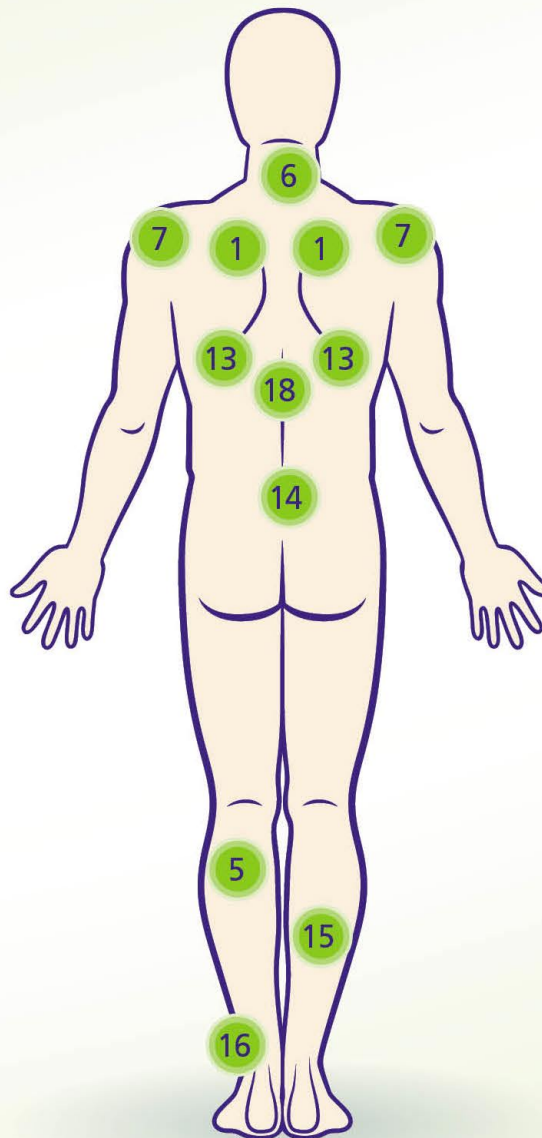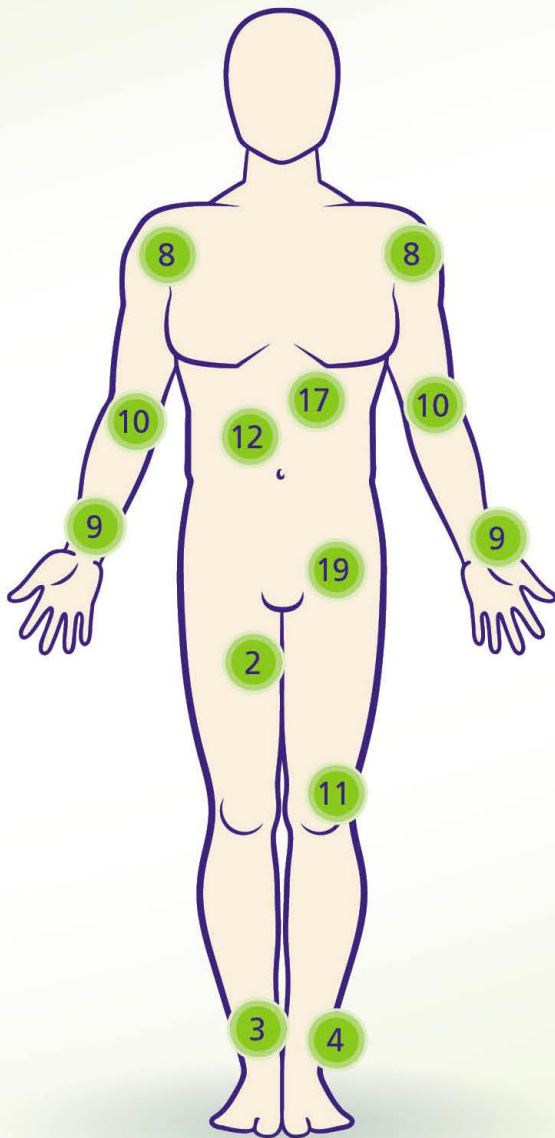

СЕРТИФИКАТЫ / РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аппарат магнитотерапевтический с низкочастотным переменным магнитным полем воздействия зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

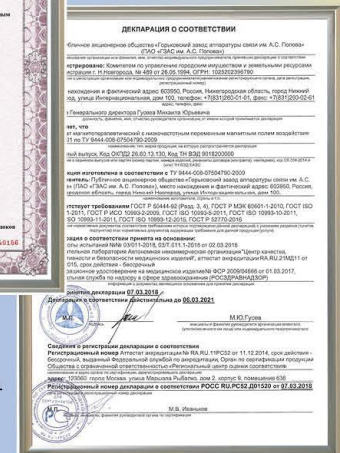

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2009/04666 AMnp-01

Разрешительное удостоверение Сертификат соответствия

КОНТАКТЫ

ООО «Академия Здоровья»  
603002, г. Нижний Новгород  
ул. Интернациональная,  
д. 100, к. 11  
тел. (831) 2600-300  
e-mail: shop@gzas.ru

